

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Brosse à dent électrique ultrasons  
silicone médical avec tête modulable  
pour enfant - Dino

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Nombre de modes** : 3
- **Timer** : 60secondes
- **Autonomie** : 15jours
- **Waterproof IPX7**
- **Dimensions** : 101x42mm
- **Composition** : Silicone médical, ABS et PCB
- **Certifié aux normes européennes**
- **Convient aux enfants de 2 à 11 ans**


## ■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Rincer le produit après utilisation.
- Ne pas utiliser pendant plus de 10 minutes.
- Ne pas utiliser pendant la charge.
- Ne pas mettre à côté d'un point d'eau pendant la charge.
- Ne pas plonger le produit dans une eau à plus de 50°C.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

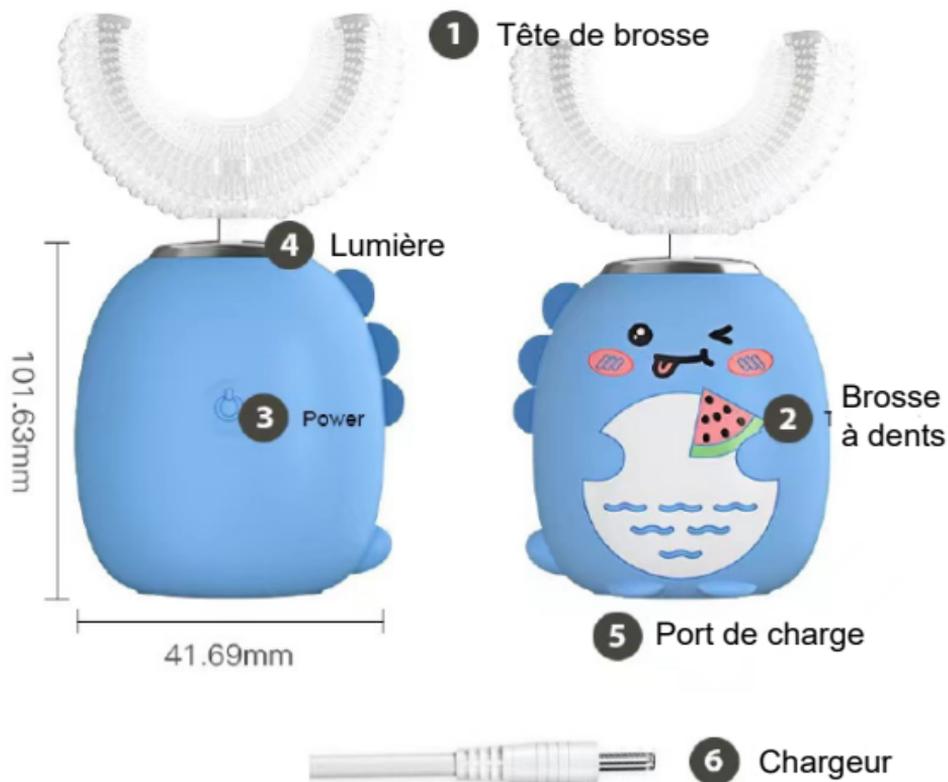

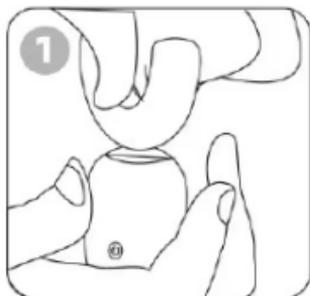

**1**  
Assemblez la brosse à dent.



**2**  
Mettez du dentifrice sur la brosse à dent.




**3**  
Allumez la brosse à dent et choisissez le mode..



**4**  
Allumez la brosse à dent et choisissez le mode.



**5**  
Rincez la brosse à dent après utilisation.

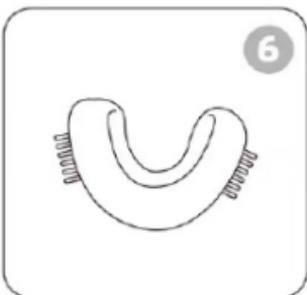

**6**  
Il est recommandé de remplacer la tête de la brosse à dent tous les 3 mois environ.

## Utilisation

Les modes sont les suivants :

### Normal

Appuyez une fois sur le bouton : 14000 fois par minute, vibrations faibles, lumière bleue allumée, s'éteint automatiquement après deux minutes.

### Rapide

Appuyez deux fois sur le bouton : 30000 fois par minute, vibrations élevées, lumière rouge allumée, s'éteint automatiquement après deux minutes.



**techkidz®**

Copyright Techkidz®. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !